



# Standz

## Pronációs és szupinációs állító rendszer semleges vagy terpesztett álláshoz



A terpesztett állítás klinikai előnyeinek és egészségügyi szakemberek javaslatainak figyelembevételével fejlesztette ki a Jenx a Standz pronációs és szupinációs állító rendszerét. A fejlesztések során nagy hangsúlyt kapott a lehető legegyszerűbb használat és adaptáció. A Standz állító rendszer tökéletes megoldás a semleges vagy terpesztett állításhoz 1-9 éves gyermekek számára.

Az esetleges lábszárhossz különbségeknél a magasságban könnyen állítható térd- és lábtámaszok adnak tökéletes megtámasztást. A Standz állítórendszer minden eleme szerszám nélkül adaptálható, megkönnyítve ezzel a szülők és az egészségügyi szakemberek feladatát. A sokféle opcionális kiegészítővel a Standz állító rendszer minden, állítással kapcsolatos elvárásnak tökéletesen megfelel.

## Termékjellemzők és előnyök

Szerszám  
nélküli  
beállítás

A beállításokhoz és az adaptációhoz nincs szükség szerszámra, mivel az összes elem kézi fogantyúval állítható és rögzíthető.

Abdukciós  
állítási  
lehetőség

Standz a lábtartók egymástól függetlenül 0-30 fok tartományban egymástól független abdukciós beállítására képesek. A beállítás és rögzítés rendkívül egyszerűen elvégezhető.

Lábszárhossz  
állítási  
lehetőség

A térd és talptámaszok magasságának oldalanként külön állításával az esetleges lábszárhossz-különbségek okozta instabilitás könnyen kompenzálható. A szerszám nélkül állítható adaptereknek köszönhetően a megfelelő adaptáció másodpercek alatt elvégezhető.

Terápiás  
asztal

Ez a hasznos kiegészítő fejleszti a mindennapi aktivitást, adaptere segítségével pedig könnyedén lehajtható, ha már nincs szükség a tálcára.

Antibakteriális  
kárpitok

Állítás során történhetnek "balesetek", amik együtt járnak a kárpitok és huzatok szennyeződésével. Az antibakteriális felületkezelésnek köszönhetően a kárpitok könnyen tisztán és baktériummentesen tarthatók.

Pontos  
beállítás

A dönthető-fektethető keret és az abdukciós lábtartók pontos beállítását a kereten elhelyezett fokskála segíti.

# Tartozékok




Alapváz  
(Kék, rózsaszín, piros, zöld és sárga színekben érhető el)



Egyenes fejtámla



Egyenes vállpárna

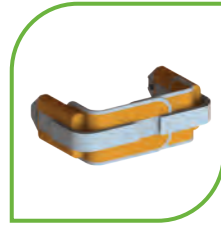


Laterális rögzítőpárna hevederrel



Terápiás asztal



Mini szett

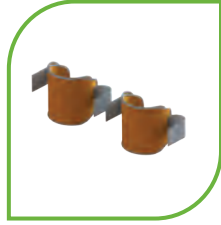


Standard térdrogzítók



Speciális térdrogzítók



Szandálok

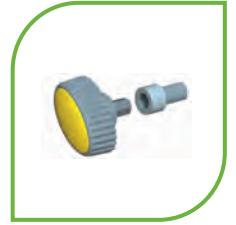


Szerszám nélkül állítható rögzítők

# Műszaki specifikációk

## FONTOS TUDNIVALÓ:

Néhány minimum és maximum az opcionális kiegészítőkkel együtt szerelve értendők

	Mérték	Mértékegység	Pronációban	Szupinációban
Életkor	kb.	év	1 - 9	1 - 9
Terhelhetőség	max	kg	45	45
Testmagasság	max	mm	1380	1380
Döntési szög	min - max	fok	5° - 90°	5° - 90°
Mellkasszélesség	min - max	mm	175 - 305	175 - 305
Csipőszélesség	min - max	mm	175 - 305	175 - 305
Térdrogzítók távolsága (középponttól középpontig)	min - max	mm	130 - 210	130 - 210
Abdukción	min - max	fok	0° - 30°	0° - 30°
Lábtámasz szöge	dorsiflexio - plantarflexio	fok	10° - 25°	25° - 10°
Szerkezeti magasság	függőleges pozícióban	mm	1080	1080
Szerkezeti magasság	vízszintes pozícióban	mm	810	810
Lábtámasztól a mellkaspárnáig számított magasság	min - max	mm	580 - 1000	580 - 1000
Méret	szél x hossz	mm	645 x 890	645 x 890

 Alapítva 1915	Rehab Zrt. 2000 Szentendre, Kalászi út 3.	info@rehabrt.hu / www.rehabrt.hu	Hungarian distributors of  Positioning for life
---	---	----------------------------------	--

Jenx Limited Wardsend Road, Sheffield S6 1RQ, United Kingdom  
 tel: +44 (0) 114 285 3376  
 email: export@jenx.com  
 web: www.jenx.com

