




Positioning for life



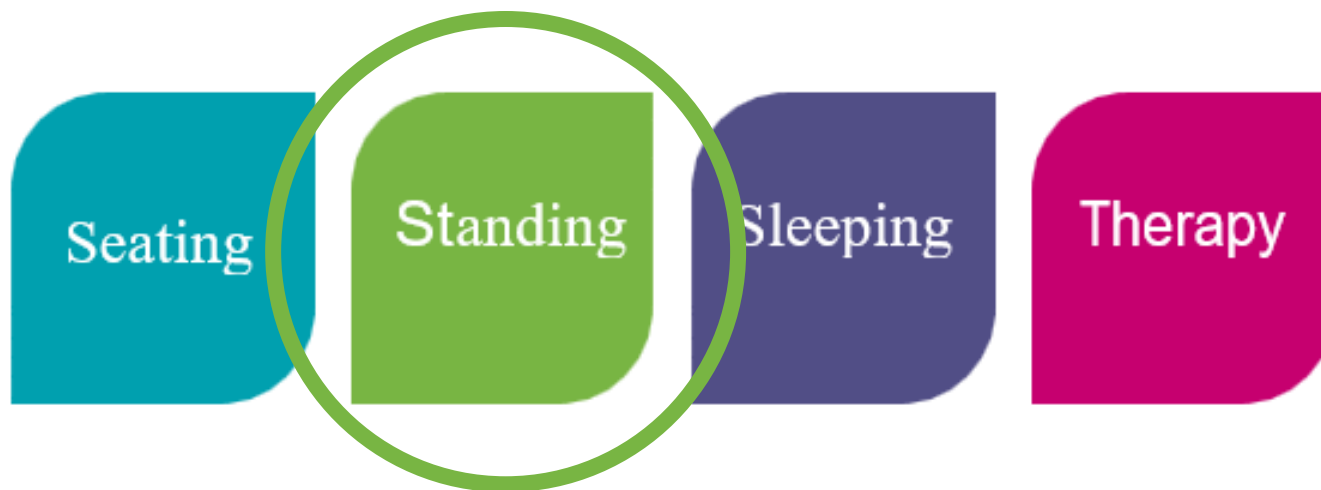

Monkey



Penguin



Kangaroo



Prone Stander

5/6/7



Multistander

8



Standz

9



Standz 2

10



Supine Stander



- **Miért fontos az állás, állítás?**

- ▶ Csontsűrűség megtartásában, javításában
- ▶ Izomtömeg megtartása, javítása
- ▶ Hólyag- és bélműködés optimális működése miatt
- ▶ Szív, tüdő működése, vérkeringés, vérnyomás
- ▶ Bőr épsége miatt
- ▶ Mentális egészség, társas kapcsolatok, tanulás

INNOVATIVE
FEATURES

Multi-use Tray
A useful surface for
work, feeding or play

Monkey by JENX



Monkey

- ▶ **Egyszerű**, mégis jól használható állító rendszer, amely 9 hónapos és 4 éves kor közötti gyermekek számára lehetővé teszi a függőleges helyzetet biztosítását.
- ▶ **Mellkas és medence pántok** a rotáció megelőzésére szolgálnak. A hevederek középen rögzíthetők és mindkét oldalról függetlenül állíthatók, ez lehetővé teszi a középvonali pozíció elérését és megtartását. A csatok és a tépőzárak segítenek a pántok rögzítésében, így azok beállítás után a helyükön maradnak.



Monkey



- ▶ **Szimmetrikusan állítható csípőpántok:** középen rögzítve, mindkét oldalról állítható, hogy a gyermek csípője középvonalban maradjon.
- ▶ **Kivehető abdukciós blokk:** a megfelelő testhelyzet kialakításához és megtartásához.



Monkey

- ▶ **Függetlenül állítható mellkasi és medencei modulok**
- ▶ **Kényelmesen párnázott**
- ▶ **Gyors szerelhetőség**
- ▶ **Egyszerű szög beállítása: a keret dőlésszöge a gyermekkel együtt állítható**

Monkey

- ▶ Világos és barátságos megjelenés
- ▶ Praktikus szandálok, melyek a pántok bontásával nyitottá tehető, így a pozícióváltás egyszerűvé válik




Monkey

adatok

adatok			
Életkor	kb.	hónap-év	9 hó – 4 év
Testsúly	max	kg	25
Mellkas szélesség	min - max	mm	185 - 285
Csípő szélesség	min - max	mm	185 - 285
Mellkas magasság (talptól a mellkaspárna felső széléig)	min - max	mm	510 - 750
Dőlés	lejtés	fok	20° - 90°
Footprint	szél. x hossz.	mm	580 x 885
Monkey magassága (from floor to top of chest pad)	állítva	mm	660 - 900

Penguin by Jenx

- ▶ A **Penguin** egy szabályozható, állítható állító rendszer amely segíti a függőleges helyzetet a 18 hónapos és 4 éves korú gyermekek számára.
- ▶ **Állítható szélességű oldaltámaszok**, melynek segítségével a gyermek könnyedén szimmetrikusan és középvonalban tartható.
- ▶ **Állítható csípőtámasz**: magassága, szélessége, szöge is állítható a gyermek igényeinek megfelelően (ennek következtében PEG-gel rendelkező gyermekek esetén is használható).

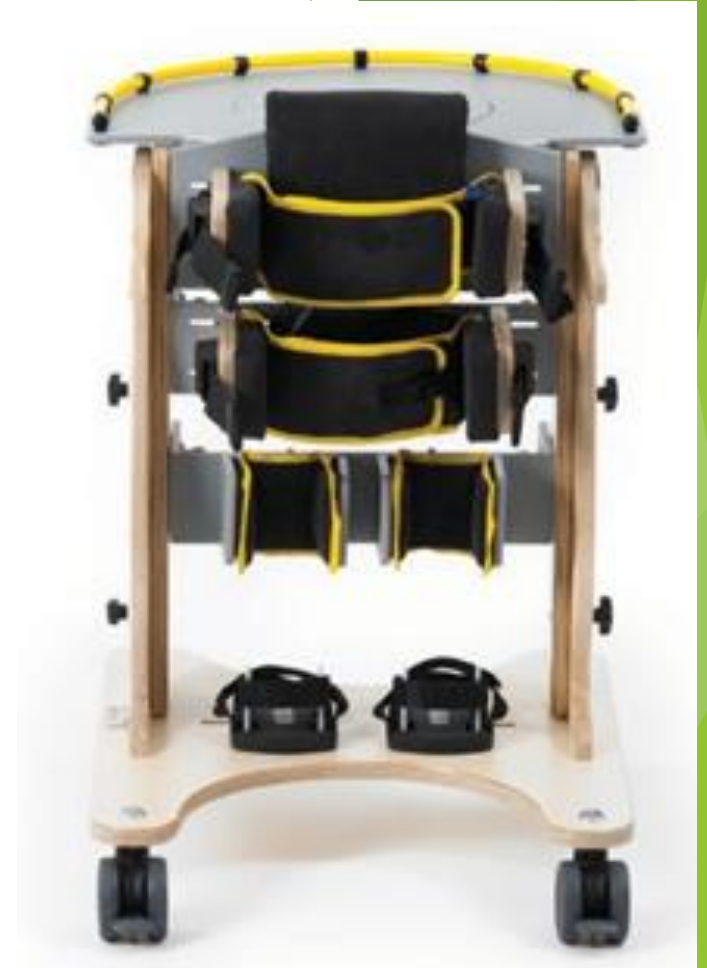

Penguin

- ▶ **Állítható térdtámasz:** magassága, pozíciója előre-hátra, szöge állítható, a gyermek ideális pozíójának érdekében
- ▶ **Állítható magasság:** a Penguin magassága állítható az ajánlásban szereplő életkor és magasság intervallumban



Penguin

adatok			
Életkor	kb.	hónap-év	18hó – 4 év
Testsúly	max	kg	25
Mellkas magasság (talptól a mellkaspárna felső széléig)	min - max	mm	600-800
Mellkaspárna szélessége	min - max	mm	145-245
Csípőpárna szélessége	min - max	mm	145-245
tálca	szél. x hossz.	mm	20° - 90°
alaplapp	szél. x hossz.	mm	500x620





Kangaroo by Jenx

- ▶ A Kangaroo egy szabályozható, állítható állító rendszer amely segíti a függőleges helyzetet a 3-7 éves korú gyermekek számára.

Kangaroo

- ▶ **Állítható szélességű oldal-támaszok**, melynek segítségével a gyermek könnyedén szimmetrikusan és közép-vonalban tartható.
- ▶ **Állítható csípőtámasz**: magassága, szélessége, szöge is állítható a gyermek igényeinek megfelelően (ennek következtében PEG-gel rendelkező gyermekek esetén is használható).



Kangaroo

- ▶ **Állítható térdtámasz:** magassága, pozíciója előre-hátra, szöge állítható, a gyermek ideális pozíciójának érdekében
- ▶ **Állítható magasság:** a Kangaroo magassága állítható az ajánlásban szereplő életkor és magasság intervallumban



Kangaroo

Életkor	approx.	mths -yrs	18mths - 4yrs
Magasság	max	kg	25
Mellkas magasság (alaplapp és a melkkaspárna felső széle)	min - max	mm	600 - 800
Melkaspárna szélessége	min - max	mm	145 - 245
Csípőpárna szélessége	min - max	mm	145 - 245
Tálca	szél. x hossz.	mm	530 - 375
Alaplapp	szél. x hossz.	mm	500 x 620



Multistander 1

3 az 1-ben pozicionálás biztosítása semleges, vagy terpesztett állásban

- ▶ Ez a rendkívül sokoldalú állító szerkezet kb. 9 hónapos és 6 év közötti gyermekek számára alkalmas, elősegítve a függőleges, hason vagy hanyatt fekvő helyzetben való pozicionálásukat, miközben lehetővé teszi a semleges vagy terpeszben lévő helyzetet is
- ▶ A magasság és a szélesség sokrétű beállítási lehetősége miatt tökéletes választás a gyermekek számára, hiszen a növekedés során teljesen a gyermek egyedi méreteihez-, illetve azok változásaihoz adaptálható, ezzel elősegítve a hosszútávú használatot 35 kg-ig
- ▶ Multistander 1 a vízszintestől akár függőleges helyzetbe hozható, így korlátlan lehetőséget nyújt a gyermekek számára szükséges testtartáshoz, testhelyezethez

Multistander 1

- ▶ Könnyű szállíthatóság
- ▶ Mellkas és medence rögzítése
- ▶ Könnyen tisztítható, bőrbarát PU párnák
- ▶ Abdukciós állítási lehetőség a terpesztés megkönnyítéséhez, 5°-os állítással, 30°-ig
- ▶ Állítható tálca: magasság, szög és mélység állítási lehetőség
- ▶ Dönthetőség: gázrugós mechanizmussal könnyen állítható. A kívánt szög beállítását a vázon jelzett szögskála jelzi. Vízszintesre is állítható.

Korosztály	kb.	hónap-év	9hónap - 6év	9hónap - 6év
Felhasználói magasság	min - max	mm	620 - 1160	600 - 1160
Felhasználói tömeg	max	kg	35	35
Mellkas szélessége	min - max	mm	140 - 275	140 - 275
Csípő szélessége	min - max	mm	140 - 275	140 - 275
Magasság (szandállemezről a felső támasztólap tetejéig)	min - max	mm	490 - 850	500 - 890
Magasság (szandállemezről a fejtámla tetejéig: csak szupinációban)	min - max	mm	620 - 1160	600 - 1160
Magasság (padlótól a felső támasztópárna tetejéig)	min - max	mm	670 - 940	610 - 940
Térdblokk szélesség	min - max	mm	120 - 190	130 - 175
Lábtartó szöge	hát - talp	Fok	15° - 15°	15° - 15°
Abdukción (A teljes 30°-os abdukción eléréséhez a lábtartónak 140 mm-re kell lennie a padlótól)	min - max	Fok	—	0° - 30°
Döntés szöge	vízszintes - függőleges	Fok	10° - 90°	10° - 90°
Alap befoglaló méret	szélesség x hosszúság	mm	615 x 760	615 x 760

Multistander 1



Multistander 2

- ▶ Ez a teljesen állítható és sokoldalú 3 az 1-ben állító keret kb. 4 - 13 éves gyerekeknek részére,
- ▶ megfelelő; magasfokú testtartási támogatást biztosít függőleges, hason fekvő vagy hanyatt fekvő helyzetben
- ▶ Multistander használatában az összes tartópárnát okosan úgy tervezték, hogy egy segítő is könnyedén mozgathassa vagy eltávolíthassa, a használó gyermek maximálisbiztonsága mellett
- ▶ A függetlenül állítható mellkasi és kismedencei támasztólapok
- ▶ Könnyen tisztítható és vízhatlan!
- ▶ Lehetővé teszi az egyes gyermekek egyéni növekedési mértékének kielégítését

Multistander 2



- ▶ A tálca magassága, a szöge és a mélysége állítható
- ▶ A Multistander 2 egy motoros vagy egy kézi állvány lehetőségét kínálja a helyben forgatás szögének beállításához.

Multistander 2

Műszaki specifikációk

Fontos információ:

Felhívjuk figyelmét, hogy néhány minimális és maximális méreteket további kiegészítő alkatrészek alkalmazásával érnek el

	Méret	Mértékegység	Multistander 2 MUS02
Korosztály	Kb.	év	4év - 13év
Felhasználói magasság	min - max	mm	1100 - 1550
Felhasználói tömeg	max	kg	60
Mellkas szélessége	min - max	mm	200 - 320
Csípő szélessége	min - max	mm	200 - 320
Magasság (szandállemezről a felső támasztólap tetejéig)	min - max	mm	750 - 1200
Magasság (szandállemezről a fejtámla tetejéig: csak szupinációban)	min - max	mm	910 - 1350 (no shoulder support) 910 - 1500 (with shoulder support)
Magasság (padlótól a felső támasztópárna tetejéig)	min - max	mm	830 - 1280
Térdblokk szélesség	min - max	mm	135 - 210
Lábtartó szöge	hát - talp		15° - 15°
Döntés szöge	vízszintes – függőleges		0° - 85° (Power base) 10° - 85° (Manual base)
Alap befoglaló méret	szélesség x hosszúság	mm	675 x 1070

Standz



- ▶ Pronációs és szupinációs állító rendszer, semleges vagy terpesztett álláshoz

Standz

- ▶ A Standz állító rendszer tökéletes megoldás a semleges vagy terpesztett állításhoz 1-9 éves gyermekek számára.
- ▶ A terpesztett állítás klinikai előnyeinek és egészségügyi szakemberek javaslatainak figyelembevételével fejlesztették ki
- ▶ Esetleges lábszárhossz különbségeknél a magasságban könnyen állítható térd- és lábtámaszok adnak tökéletes megtámasztást.
- ▶ A Standz állítórendszer minden eleme szerszám nélkül állítható
- ▶ Standz a lábtartók egymástól függetlenül 0-30 fok tartományban egymástól független abdukciós beállítására képesek.
- ▶ a kárpitok könnyen tisztán és baktériummentesen tarthatók.
- ▶ A lábtartók pontos beállítását a kereten elhelyezett fokskála segíti.

Életkor	kb.	év	1 - 9	1 - 9
Terhelhetőség	max	kg	45	45
Testmagasság	max	mm	1380	1380
Döntési szög	min - max	fok	5° - 90°	5° - 90°
Mellkasszélesség	min - max	mm	175 - 305	175 - 305
Csipőszélesség	min - max	mm	175 - 305	175 - 305
Térdrögztők távolsága (középponttól középpontig)	min - max	mm	130 - 210	130 - 210
Abdukció	min - max	fok	0° - 30°	0° - 30°
Lábtámasz szöge	dorsiflexio - plantarflexio	fok	10° - 25°	25° - 10°
Szerkezeti magasság	függőleges pozícióban	mm	1080	1080
Szerkezeti magasság	vízszintes pozícióban	mm	810	810
Lábtámasztól a mellkaspárnáig számított magasság	min - max	mm	580 - 1000	580 - 1000
Méret	szél x hossz	mm	645 x 890	645 x 890

Standz 2



- ▶ Pronációs és szupinációs állító rendszer, semleges vagy terpesztett álláshoz
- ▶ A sokoldalú Standz 2 pronációs vagy szupinációs állítást tesz lehetővé semleges vagy terpesztett állásban 5 -14 éves gyermekek számára

Standz 2

- ▶ A funkcionális kiegészítők tökéletes és biztonságos megoldást nyújtanak a nagyobb korú gyermekek állítására
- ▶ beállításokhoz és az adaptációhoz nincs szükség szerszámra, mivel az összes elem kézi fogantyúval állítható és rögzíthető.
- ▶ Standz a lábtartók egymástól függetlenül 0-30 fok tartományban, 5 fokenként és egymástól független abdukció beállítására képes.
- ▶ lábtartók pontos beállítását a kereten elhelyezett fokskálák segíti.
- ▶ A Standz 2 a vázon elhelyezett kar segítségével dönthető 0-90 fok tartományban
- ▶ Az antibakteriális felületkezelésnek köszönhetően a kárpitok könnyen tisztán és baktériummentesen tarthatók.

Standz 2

Életkor	kb.	év	5 - 14	5 - 14
Terhelhetőség	max	kg	70	70
Testmagasság	min - max	mm	990 - 1600	990 - 1600
Döntési szög	min - max	fok	0° - 90°	0° - 90°
Vállszélesség	min - max	mm	-	200 - 290
Mellkasszélesség	min - max	mm	220 - 360	220 - 360
Csipőszélesség	min - max	mm	250 - 370	250 - 370
Térdrögítők távolsága (középponttól középpontig) természetes álláspozíció		mm	220	220
Abdukció	min - max	fok	0° - 30°	0° - 30°
Lábtámasz szöge	dorsiflexio - plantarflexio	fok	15° - 15°	15° - 15°
Szerkezeti magasság	függőleges pozícióban	mm	1130	1230
Szerkezeti magasság	vízszintes pozícióban	mm	900	900
Lábtámasztól a mellkaspárnáig számított magasság	min - max	mm	820 - 1160	820 - 1160
Méret	szél x hossz	mm	760 x 1070	760 x 1070

Supine Stander 1 és 2

- ▶ Egy teljes megtámasztást nyújtó állító rendszer
- ▶ Jenx Supine Stander 1 és 2 robusztus és könnyen használható függőleges testhelyzetet, páratlan stabilitást és biztonságot nyújt a hanyatt fekvő gyermekek számára kb. 9 hónaptól 11 éves korig, 50 kg súlyhatárig.



Supine Stander 1 és 2

- ▶ Szerszám nélküli beállítás, összes elem kézi fogantyúval állítható és rögzíthető.
- ▶ Standz a lábtartók egymástól függetlenül 0-30 fok tartományban, 5 fokenként és egymástól független abdukció beállítására képes
- ▶ A dönthető-fektethető keret és az abdukciós lábtartók pontos beállítását a kereten elhelyezett fokskálák segíti.
- ▶ A Standz 2 a vázon elhelyezett kar segítségével dönthető 0-90 fok tartományban
- ▶ Az antibakteriális felületkezelésnek köszönhetően a kárpitok könnyen tisztán és baktériummentesen tarthatók.

Supine Stander 1 és 2

Műszaki specifikációk

	Méret	Mértékegység	Supine Stander 1	Supine Stander 2
Korosztály	kb.	hónap-év	9hónap - 4év	3hónap - 11év
Felhasználói tömeg	max	kg	25	50
Felhasználói magasság	max	mm	1060	1460
Mellkas szélesség	min - max	mm	130 - 310	130 - 310
Csípőszélesség	min - max	mm	130 - 310	130 - 310
Térdpárna szélesség	min - max	mm	130 - 310	130 - 310
Dönthetőség	supine	Fok	10° - 90°	10° - 90°
Talptámasz szög	hát - talp	Fok	0°	0°
Lábszárhossz	min - max	mm	500 - 1070	900 - 1470
Támasztóablák mérete (minden szekció)	szélesség x hosszúság	mm	480 x 940	480 x 1345
Talptámasz mérete	szélesség x hosszúság	mm	575 x 660	650 x 995

Prone Stander Pronációs állító rendszer



- ▶ A test elülső oldalát megtámasztó állvány célja, hogy az állást élvezetessé és praktikusá tegye gyermeke és egyszerűvé a segítő számára.
- ▶ Dőlésszög és magasság állítható. Az állvány 0° és 40° között dönthető, és a magasság fokozatmentesen állítható
- ▶ Az innovatív billenthető lábtartó kialakítása elősegíti az ülésből állásba történő mobilizálás megkönnyítését.
- ▶ Állítható mellkas és csípőpárnák, PU támaszok különböző szélességben, magasságban és szögben állíthatók
- ▶ A biztonsági hevederrel stabil helyzetet teremt a gyermek számára.

Prone Stander

Műszaki specifikációk

	Méreték	Mértékegység	Prone Stander 1 PS03	Prone Stander 2 PS04
Korosztály	Kb.	év	3év - 7év	6év - 14év
Felhasználói tömeg	max	kg	55	70
Mellkas szélesség	min - max	mm	190 - 290	230 - 350
Csípőszélesség	min - max	mm	190 - 290	230 - 350
Csípőpárna magasság	min - max	mm	410 - 750	480 - 960
Mellkas magassága a lábtartótól	min - max	mm	660 - 1000	820 - 1270
Dönthetőség	vízszintes – függőleges	Fok	40° - 90°	40° - 90°
Befoglaló méret	szélesség x hosszúság	mm	645 x 930	700 x 1230

- ▶ Ha szeretne a termékről bővebb információt kapni, egyeztetni személyes konzultációt kérjük írjon az alábbi email címre:

krisztina.polacsek@rehabrt.hu